

Hatásuk meggyőző és nincs ismert mellékhatásuk.

A **BioNette™** készülék bevezetése egy forradalmian új, gyógyszermentes alternatívát kínál a szénanátha gyógyszermentes kezelésében.

Egyéb BIOLIGHT termékek:

BIOSTICK™, BIOBEAM™ 660, BIOBEAM™ 940, és BIOBEAM™ ACNE.

BioNette™ bejegyzett védjegy

TISZTÍTÁS

Tisztítás: A fényforrást enyhe tisztítóoldattal átitatott puha, nedves ruhával tisztítsuk. A BioNette™ -t soha ne tegyük víz alá!

Fertőtlenítés: A fényforrások tisztítását gyógyszerárban kapható impregnált fertőtlenítő kendőkkel javasoljuk.

Hygiéniai védelem: Tartsuk a készüléket mindig a lehető legtisztábban!

PROBLÉMA KEZELÉS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás/Teendő
A vörös fény nem világít	Az elemek lemerültek	Cserélje ki az elemeket
	Az elemek nem megfelelően lettek behelyezve	Helyezze be helyesen az elemeket
	A BioNette meghibásodott	Ha a fentiek nem vezettek eredményre, keresse meg a forgalmazót
A vörös fény villog	Az elemek gyengék	Cserélje ki az elemeket

A GYÁRTÓ KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSA

A vásárló felé tanúsított jótállás a biztosíték, hogy a készülék anyagát és működését tekintve is hibamentes.

A jótállás a vásárlás időpontjától számított 2 évig érvényes.

A jótállás kiterjed a javításra illetve a készülék ingyenes cseréjére, amennyiben a készülék meghibásodása normál működési körülmények között és a használati útmutatónak megfelelő használat mellett következett be.

A JÓTÁLLÁS NEM ÉRVÉNYES A KÖVETKEZŐ ESETEKBEN:

- a. A használati útmutatónak nem megfelelő használat
- b. A készülék javítása nem a gyártó vagy a gyártó által felhatalmazott képviselő által történt.
- c. Véletlenszerű törés vagy sérülés esetén
- d. Nem megfelelő elem használatából bekövetkezett károsodás.

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne nézzen közvetlenül a fényforrásba!

Gyermekek csak szülői felügyelet mellett használhatják!

Szimbólumok a csomagoláson

	A figyelmeztetés szigorúan betartandó		Az Európai Unióban felhatalmazott képviselő
	Gyártó		Nézze meg a használati útmutatóban
	Type "BF" IEC 60601-1		A gyártás időpontja
	WEEE – Elektromos és elektronikai készülék. Veszélyes hulladék		CE0123
			RoHS 2002/95/EC



A gyártást engedélyezte: BioLight Medical Devices (IL) Ltd
No. 9 Baretk St. Petah Tikva, POB2263, Kiryat Ono, 5512201, Israel



Changzhou BioLight Medical Devices Co. Ltd
Israel Centre; Building 7C, No. 123 He Xiang Rd.,
Wujin Dist, Changzhou 213149, Jiangsu, China




Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg Germany
Tel: +49-40-2513175/2513178 Fax: +49-40-255726

Gyártói tanúsítványok: ISO 13485 (2012), MDD 2007/47 EEC (2007),
A fényterápiás technológia & alkalmazás szabadalmaztatott.
A BioNette eszköz világszerte szabadalmaztatott.



bionette

az allergies nátha kezelésére

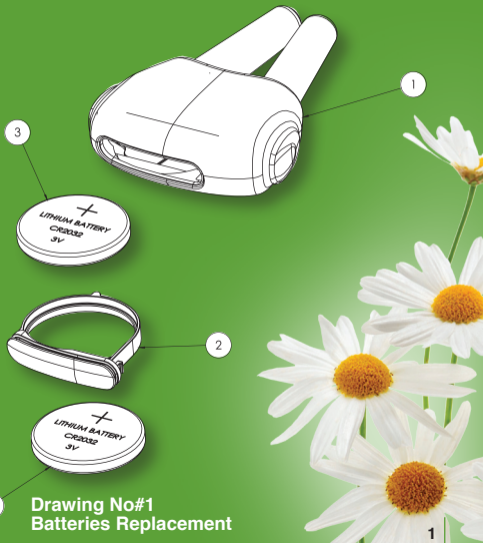

Drawing No#1
Batteries Replacement

BioNette™

Egy forradalmian új eszköz az allergiás nátha (szénanátha) kezelésére. A **BioNette™** enyhíti és hatékonyan megelőzi az allergiás náthához kapcsolódó tüneteket: torok viszketést, szem viszketést, orr viszketést, orrfolyást, könnyezést, tüsszentést, szem körüli vizenyőt. A kezelésnek nincs ismert mellékhatása, mint a gyógyszeres kezelésnek. A kezelés a fototerápia alapelvein nyugszik. (Kezelés fény energiával.) A **BioNette™** eszköz alacsony energiájú, szűk spektrumú vörös fény energiát alkalmaz.

AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Egy kezelés alkalmanként kb. 4,5 percig tart. Naponta 2-3 kezelés javasolt. A maximális hatékonyság elérése és a panaszok optimális enyhítése érdekében javasolt a **BioNette™** kezelések elkezdése azonnal a nátha első tüneteinek megjelenésekor. Ahogyan javulás észlelhető, a kezelések gyakorisága fokozatosan csökkenthető, egészen a panaszok teljes megszűnéséig.

BioNette™ egy kicsi eszköz, amely akár a legkisebb zsebben is elfér.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Húzza ki az elem vékony, átlátszó záró szalagját.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Depress and hold both rubber buttons on the sides of the device. The two Nyomja le és tartsa nyomva a gombokat a készülék mindkét oldalán (1). A két áttetsző villa vörös fényt bocsát ki.
- Győződjön meg róla, hogy a fény folyamatosan világít és nem villog.
- Helyezze be a két villát az ornyílásokba úgy, hogy közben nyomva tartja a gombokat.
- Ezután elengedheti a gombokat, a készülék nem fog kiesni az orrból.
- Ha a kezelés befejeződött, kb. 4,5 perc elteltével, a vörös fény automatikusan kialszik. (Ha egyszer be lett kapcsolva a fény, akkor már kezelés közben nem kapcsolható ki).
- Kövesse a tájékoztatóban alábbiakban található tisztítási útmutatót.
- A készüléket naponta 2-3-szor ajánlott használni. Az eredményesség növelése érdekében többször is alkalmazható.

Figyelmeztetés: • Gyermekek elől elzárandó! • Gyermekek csak szülői felügyelettel használhatják • Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba! 2

ELEM CSERE

A BioNette csomag a készülékben (1) található elemeken kívül 2 db jó minőségű lithium CR2032 (3V) elemet tartalmaz. Emelje ki a készülék alján található az elemtartót (2) és helyezze be a tartalék elemeket (3) megfelelő pozícióban, ahogy az az ábrán látható. 2

TECHNIKAI ADATOK

Fény tulajdonsága	Szűk spektrumú, 630 nm-es vörös fény
Teljesítmény	Minimum 10.0 mW (+/-20%) mindkét ornyílásba
Energia dózis	2.7 joule
Időzítő	Nyomógombos működtetés, kb. 4,5 perc után automatikusan kikapcsol.
Időzítő pontosság	+/- 15%
Energia forrás	2X CR2032 (3v)
Áramerősség (Max)	0.03A
Elem élettartam	Kb. 80 kezelés
Alacsony elem töltöttség kijelzés	A LED fényforrás villog
Súly	18 gramm elemekkel
Méret	52x38x15 mm

KÖLCSÖNHATÁSOK

Nincs ismert kölcsönhatás, amennyiben a fényterápiát gyógyszereszedés mellett alkalmazzák. A **BioNette™** gyógyszerek, mint például antihisztaminok vagy szteroidok vagy egyéb gyulladáscsökkentők szedésével egyidejűleg is alkalmazható.

MELLÉKHATÁSOK

A **BioNette™** alkalmazásának nincs ismert mellékhatása. Még a súlyos allergiás tünetektől szenvedők is naponta több, mint 3 alkalommal használhatják a **BioNette™**-t bármilyen mellékhatás nélkül.

A BIOLIGHT TERMÉKCSALÁDRÓL

A BIOLIGHT termékcsoporthoz – amelynek a **BioNette™** az egyik tagja – olyan termékekből áll, amelyek alacsony energiájú, szűk spektrumú fényenergiát alkalmaznak non-invazív, gyógyszermentes kezelésekhez. Ezeket a készülékeket a fény biológiájában és a fényterápiában jártas tudósok és orvosok fejlesztik. A hatásosságot nagy számú, kórházakból és klinikákról kapott tudományos és klinikai adat támasztja alá. Ezek az adatok és vizsgálatok világszerte elismert szakmai folyóiratokban kerülnek publikálásra. Ezek a készülékek jelentős áttörést jelentenek a gyógyszer nélküli kezeléseknél.